


REF	Description	Size	Units
909220	Stop Strip w/Stop Sign	12" x 50"	Each
909221	Stop Strip - Yellow (no stop sign)	12" x 50"	Each
909217	Stop Strip w/alarm	12" x 50"	Each

### Purpose

These brightly colored strips help to prevent accidents by directing residents away from potential hazard areas. Promotes resident privacy. Placed across a room doorway, this brightly colored strip often stops the cognitively impaired wanderer from entering another resident's room. It also acts as a reminder for the resident inside a room not leave without first notifying a staff member. Secured with VelcroR, the Stop-Strip is not a physical barrier, so it may be used as part of a restraint reduction program.


### Easy to Use

Peel the backing off the two Velcro® pressure-sensitive strips and attach them to the left and right sides of the door frame or to the wall on either side of the door frame. These strips should be positioned at midheight on the door frame or on the wall next to the door frame. (See illustration at right.) **IMPORTANT:** Attach the pressure sensitive strips to the corridor side of the door frame or wall so that the Stop-Strip is outside the room. (See illustration above.)

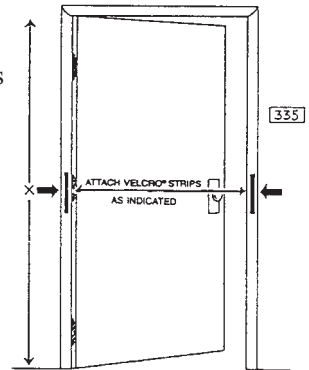

Do not place the Stop-Strip across fire and emergency exit doors.

*Voir au verso pour la traduction française*

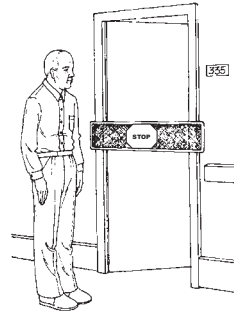

N° Réf	Description	Taille	Unité
909220	Stop Strip avec panneau STOP	30.5cm x 127cm	À l'unité
909221	Stop Strip - jaune (pas de panneau d'arrêt)	30.5cm x 127cm	À l'unité
909217	Stop Strip de avec alarme	30.5cm x 127cm	À l'unité


### Objectif

Ces bandes colorées très voyantes permettent d'éviter les accidents en incitant les résidents à s'éloigner des zones potentiellement dangereuses. Elles contribuent à protéger l'intimité des résidents. Placée en travers de l'embrasure d'une porte, cette bande colorée suffit souvent à arrêter un individu souffrant de troubles cognitifs et à l'empêcher d'entrer dans la chambre d'un autre résident. Elle permet également de rappeler à un résident qui se trouve dans sa chambre qu'il ne peut la quitter sans en informer au préalable un membre du personnel soignant. Fixé à l'aide d'une bande Velcro®, le Stop-Strip ne constitue pas une barrière physique; il peut donc être utilisé dans le cadre d'un programme de réduction des contentions physiques.

### Facile à Utiliser

Retirer la pellicule protectrice recouvrant les deux bandes Velcro® autocollantes qui doivent être placées de part et d'autre de l'embrasure de la porte ou sur le mur de chaque côté de la porte. Ces bandes doivent être placées à mi-hauteur de l'embrasure de la porte ou du mur. (Voir schéma ci-contre).

**IMPORTANT :** Appliquer les bandes adhésives du côté couloir de l'embrasure de la porte ou du mur, de telle sorte que le panneau STOP du Stop-Strip soit à l'extérieur de la pièce.

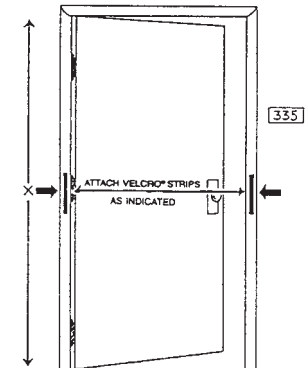

### Attention

Ne jamais placer le Stop-Strip en travers des portes coupe-feu ou des issues de secours.